



# TEST TSOFF D'HEMOSURE®

-Test de Sang Occulte Fécal (TIF-Test Immunochimique Fécal)



## La bonne raison clinique et financière pour les Tests de sang occulte fécal

« L'American College of Gastroenterology (ACG) soutient la recommandation commune que les anciens tests de sang occulte fécal au gaïac soient abandonnés en tant que méthode de dépistage du cancer du côlon... L'ACG recommande le Test Immunochimique Fécal en remplacement dans le test de dépistage du cancer. »

Imprimé à nouveau avec la permission de MacMillan Publishers Ltd : The American Journal of Gastroenterology (2320970223955), droit d'auteur (2009)

## Résumé et comparaison

	HEMOSURE® approuvé par la FDA (Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et certification CLIA non obligatoire	TEST AU GUAÏAC TRADITIONNEL
<b>Méthode de test</b>	Immunodosage	Test chimique
<b>Interprétation</b>	Lecture claire et précise comparable à un test de grossesse	Couleur bleue, souvent difficile à interpréter
<b>Spécificité gastro-intestinale inférieure</b>	> 96 %. Hautement spécifique pour l'hémoglobine humaine	Mauvaise. Faux positif dû aux aliments et aux médicaments
<b>Sensibilité globale</b>	> 87 %. Détecte à partir de 50ng hHB/mL d'hémoglobine humaine spécifique	50 %. Détecte 90 000ng hHB/mL ou plus d'hémoglobine non-spécifique
<b>Précision</b>	> 97%	< 86%
<b>Préparations ou restrictions médicamenteuses ou alimentaires</b>	AUCUNE	Oui, plusieurs jours.
<b>Échantillons obligatoires</b>	UN obligatoire	TROIS obligatoires



# TEST TSOFF D'HEMOSURE®

-Test de Sang Occulte Fécal (TIF-Test Immunochimique Fécal)




Remarque : Aucune restriction médicamenteuse ou alimentaire

## INSTRUCTIONS POUR LES PATIENTS

### ÉTAPE 1

#### Dépôt de l'échantillon

**A** Relevez le siège des toilettes et placez le papier de collecte de l'échantillon en travers de la cuvette. Maintenez-le en place en collant le ruban adhésif sur les côtés de la cuvette. Rabaissez le siège.

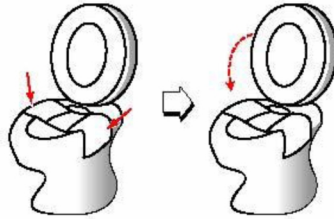

**B** Allez à la selle sur le papier de collecte.



### ATTENTION !


N'oubliez pas de remplir les étiquettes jointes aux tubes.




### ÉTAPE 2

#### Collecte de l'échantillon


**A** Dévissez le bouchon violet du tube de collecte de l'échantillon. **NE VIDEZ PAS LE LIQUIDE.**

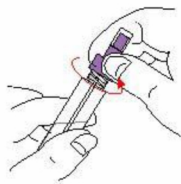

**B** Insérez l'applicateur en spirales dans les selles à 6 endroits différents. Utilisez assez de matières fécales pour recouvrir le dessus de l'applicateur. **VEILLEZ À NE PAS BOUCHER, VIDER OU REMPLIR LE TUBE.**

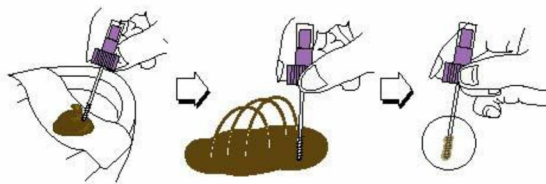

**C** Revissez l'applicateur dans le tube en serrant bien.

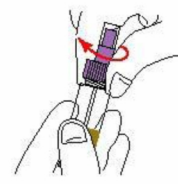

### ÉTAPE 3

#### Renvoi de l'échantillon

**A** Remplissez l'enveloppe de retour pour votre médecin ou laboratoire.



**B** Insérez le tube de collecte de l'échantillon dans la pochette de prélèvement et fermez-la. Insérez la pochette de prélèvement dans l'enveloppe de retour et fermez-la.



**C** Renvoyez immédiatement le paquet contenant l'échantillon à la clinique ou au laboratoire, par courrier ou en personne.



**HEMOSURE, INC**

DCM136063-1.0

Le logo d'Hemosure est une marque déposée d'Hemosure, Inc.

