



XÉT NGHIỆM HEMOSURE® iFOB

Kiểm tra Máu ẩn trong Phân
qua phân tích hóa học của Hệ thống miễn dịch (FIT)



Xét nghiệm Máu ẩn trong phân là lựa chọn chính xác về sức khỏe và kinh tế

“Tổ chức sức khỏe ACG khuyến rằng phương pháp xét nghiệm truyền thống Guaiac Test không còn được sử dụng cho Xét nghiệm mẫu phân máu. Thay vào đó, tổ chức ACG khuyến dùng phương pháp xét nghiệm FIT có khả năng phát hiện ung thư”.

Reprinted by permission from MacMillan Publishers Ltd: The American Journal of Gastroenterology (2320970223955), copyright (2009)

Kết luận & So sánh

	HEMOSURE® ĐÃ ĐƯỢC FDA & CLIA CHỨNG NHẬN	Theo truyền thống XÉT NGHIỆM GUAIAIC
Phương Pháp	Xét nghiệm Hệ Miễn Dịch Hóa Học	Xét Nghiệm Hóa Học
Giải thích Kết quả	Kết quả đọc chính xác rõ ràng như Xét Nghiệm Thai Nhi	Màu xanh dương. Rất khó định kết quả
Giảm đặc trưng GI	> 96%. Đặc biệt cao hơn cho Hồng cầu ở người	Kém. Kết quả sai lệch khi có thức ăn hoặc dùng thuốc khác.
Tổng độ nhạy	> 87%. Phát hiện được mức thấp nhất đến 50ng hHB/ml Hồng cầu đặc trưng ở người	50%. Phát hiện 90,000ng hHB/ml hoặc cao hơn cho Hồng cầu không đặc trưng
Độ chính xác	>97%	<86%
Hạn chế ăn uống hoặc dùng thuốc trước xét nghiệm	KHÔNG CẦN.	CẦN hạn chế trong vài ngày.
Số mẫu thử cần	CHỈ CẦN 1 mẫu phân	CẦN 3 mẫu phân



XÉT NGHIỆM HEMOSURE® iFOB

Kiểm tra Máu ẩn trong Phân
qua phân tích hóa học của Hệ thống miễn dịch (FIT)




Chú ý: Không hạn chế ăn uống hoặc dùng thuốc

Hướng dẫn bệnh nhân

BƯỚC 1 Cách Đặt Giấy Lấy Mẫu Phân

A Nâng đứng nắp ngồi của bồn vệ sinh. Trải giấy lấy mẫu thử ngang 2 rìa của bồn. Giữ 2 rìa giấy mẫu dính vào rìa bồn vệ sinh. Hạ nắp xuống.

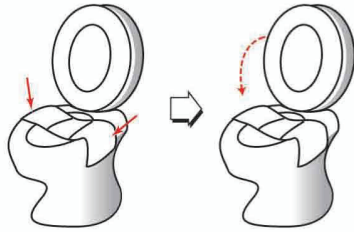


B Hạ người ngồi lên bồn sao cho hậu môn vào tâm mặt giấy.




Chú ý!

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào Thẻ giấy đính kèm trên Ống mẫu phân.

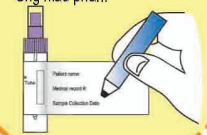


BƯỚC 2 Cách Thu Thập Mẫu Phân


A Xoay ngược đồng hồ nắp màu tím của Ống mẫu. **KHÔNG ĐƯỢC BỎ DUNG DỊCH TRONG ỐNG MẪU.**

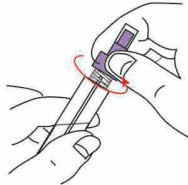

B Tay giữ đầu Ống đâm thẳng nhẹ vừa đủ ngấm đoạn đầu xoắn của thân nắp vào 6 vị trí khác nhau của mẫu phân. **KHÔNG LẤY THÀNH CỤC, XÚC HAY QUÁ ĐẦY.**

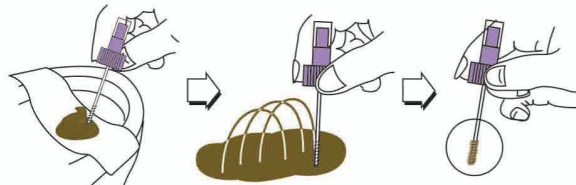

C Đẩy chặt nắp lại theo chiều kim đồng hồ vào Ống mẫu thử.

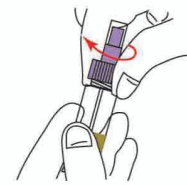

BƯỚC 3 Gửi Mẫu Phân đến Phòng Xét Nghiệm


A Điền đầy đủ thông tin và địa chỉ người gửi & người nhận là bác sĩ hoặc phòng xét nghiệm vào Phong thư riêng.



B Đặt Ống mẫu phân vào một túi đặc biệt và được dán kín lại, sau đó được cho vào Phong thư ở Bước A đã có đầy đủ thông tin gửi và nhận rồi dán kín tất cả lại.



C Lập tức gửi ngay tất cả trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Bệnh viện hay Phòng xét nghiệm.

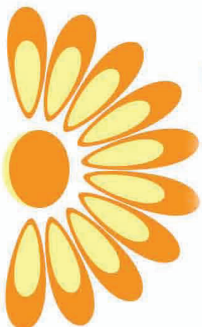

HEMOSURE, INC

Hemosure logo là nhãn hiệu đã được đăng ký của Công ty Hemosure, Inc.